

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES


PS 4110

SUOMI



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

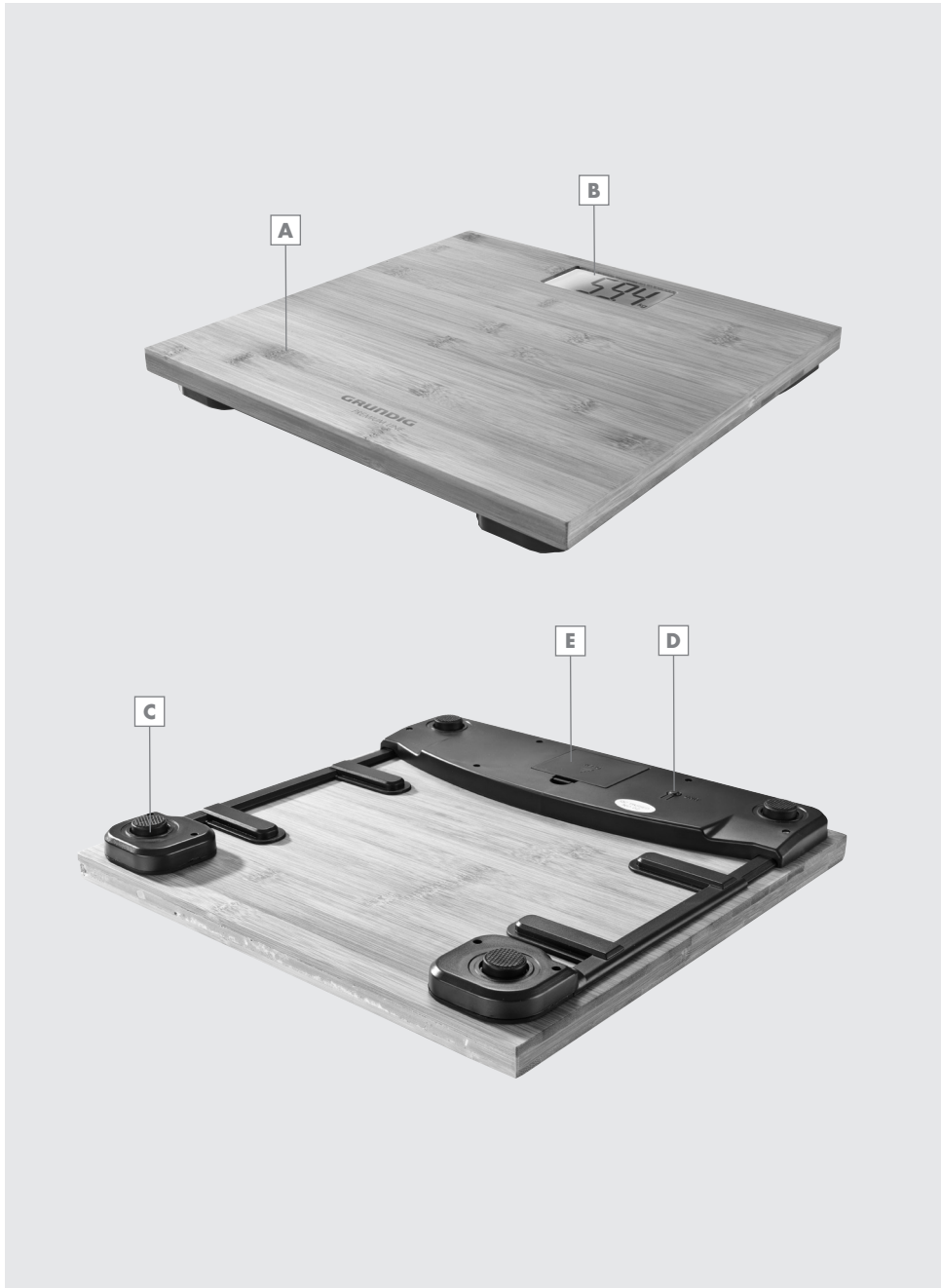

TURVALLISUUS JA ASETUKSET

Lue tämä käyttöopas huolellisesti kokonaan ennen tämän laitteen käyttöä! Noudata kaikkia turvallisuusohjeita, jotta vältetään vääristä käytöstä aiheutuneet vahingot!

Säilytä käyttöopas myöhempää käyttöä varten. Jos tämä laite annetaan jollekin kolmannelle osapuolelle, anna myös käyttöopas uudelle haltijalle.

- Laite on suunniteltu vain kotitalouskäyttöön. Älä käytä laitetta mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuin sen omaan, joka on painon mittaaminen.
- Älä käytä laitetta matolla tai viltillä.
- Käytä laitetta aina tasaisella, kovalla pinnalla. Tämä varmistaa jatkuvan mittauksen.
- Älä käytä laitetta märillä jaloilla tai kun bambuspinta on kostea tai märkä.
- Varmista aina, että laite ei keikahda, vammautumisvaaran ehkäisemiseksi.
- Älä koskaan käytä laitetta ulkona.
- Älä jatka laitteen käyttöä, jos ilmenee häiriötä.
- Älä jatka laitteen käyttöä, jos se putoaa tai jos pinnassa on rakoja tai säröjä.
- Älä sijoita mitään esineitä pinnalle.
- Älä hyppää laitteen päälle.
- Jos laitetta käytetään kylpyhuoneessa, se ei koskaan saisi koskea veteen.



- Älä upota laitetta veteen tai mihinkään muuhun nesteeseen; älä pidä sitä juoksevan veden alla.
- Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle, korkeille lämpötiloille tai jatkuvalla korkealla kosteudella.
- Pidä laite etäällä lapsista.

- Tätä laitetta voi käyttää 8 vuotiaat ja vanhemmat lapset sekä sellaiset henkilöt, joilla on vähentynyt fyysinen, aistillinen tai henkinen kyky tai joilla ei ole kokemusta tai tietämystä, jos heidän laitteen käyttöä seurataan tai ovat saaneet ohjeita laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai käyttäjän ylläpitoa ilman valvontaa.
- Älä koskaan käytä laitetta jos se on silminnähtävästi vahingoittunut.
- GRUNDIG-kotitalouslaitteemme ovat soveltuvien turvallisuusstandardien mukaisia. Jos laite vahingoittuu, sen korjaaminen tai vaihtaminen on jätettävä jälleenmyyjälle, huoltokeskukselle tai vastaavalle pätevälle ja valtuutetulle henkilölle vaarojen välttämiseksi. Väärin tehty tai valtuuttamaton korjaus voi aiheuttaa käyttäjälle vaaroja.
- Älä pura laitetta missään olosuhteissa. Takuuvaatimuksia ei hyväksytä sopimattoman käsittelyn aiheuttamista vahingoista.
- Puhdistat laitteen ”Puhdistus ja huolto” jaksossa selitetyllä tavalla. Kuivaa laite sen puhdistamisen jälkeen.
- Älä käytä tai sijoita tätä laitetta kuuman pinnan päälle tai lähelle, kuten kaasukeittimen, sähkökeittimen tai lämmitetyn uunin lähelle.
- Älä koskaan käytä laitetta sellaisissa paikoissa tai niiden lähellä, missä on syttyviä tai palavia materiaaleja.
- Älä yllilataa tätä laitetta.
- Jos laite toimii huonosti, yritä asettaa se poistamalla patterit lyhyeksi ajaksi tai vaihtamalla ne.
- Käytä ainoastaan korkealaatuisia pattereita. Huonolaatuiset patterit voivat vuotaa ja

aiheuttaa vahinkoa laitteessa.

- Äärimmäiset olosuhteet, kuten kuuma ja hyvin kostea ympäristö tai tämän laitteen vääränlainen käyttö voi aiheuttaa pattereiden vuodon, joka voi aiheuttaa henkilövammutumisen. Jos akut vuotavat, poista ne rätillä ja hävitä ne sovellettavien lakien mukaisesti. Ehkäise patterin hapon pääseminen iholle tai silmiin. Jos akun happoa pääsee silmiisi, huuhtelee silmäsi perusteellisesti runsaalla vedellä ja kysy neuvoa heti lääkäriltäsi. Jos patterin happoa pääsee ihollesi, pese alue runsaalla vedellä ja saippualla.
- Patterit ovat vaarallisia nieltäessä. Pidä patterit ja laite aina kaukana lasten ulottuvuudelta. Jos nielet patterit, hae heti lääkärin apua.
- Pattereita ei koskaan saa ladata tai reaktivoita millään tavalla, eikä niitä saa heittää tuleen. Älä koskaan heitä pattereita veteen.
- Jollet aio käyttää laitetta pitkään aikaan, säilytä se huolella, poista patterit. Laite voi vahingoittua vuodon tapauksessa.
- Jos vaakasi ei toimi kunnolla, vaihda patterit.
- Pattereita ei saa hävittää yhdessä kotilousjätteen kanssa! Hävitä kuluneet patterit ympäristöystävällisellä tavalla ja sovellettavien lakisäätelyjen mukaisesti.
- Älä koskaan käytä vanhoja ja uusia pattereita tai erimerkkisiä pattereita samanaikaisesti.
- Ennen laitteen hävittämistä poista patterit.
- Kun laitat patterit paikalleen ota huomioon polariteetti, kuten patterin lokerossa osoitetaan. Älä oikosulje pattereita.
- Vaaka kytkeytyy pois automaattisesti 10 sekunnin jälkeen, kun mittaus on valmis.
- Kun patterin jännite on alhaalla, "Lo" matala patterin varoitus ilmestyy näyttöön. Vaihda patteri uusiin.

Varotoimi

- PS 4110 on hyvinvointituote. Se ei ole lääketieteellinen tuote. Sen käytön tai näytettyjen tulosten perusteella ei voida tuoda lääkinnällisiä päätöksiä.
- Tuotteesi on suunniteltu monimutkaisilla algoritmeilla. Näiden algoritmien vuoksi, jos ilmenee ulkoista sähkömagneettista häiriötä laitteen lähellä, se voi vaikuttaa lukemiisi. Näissä tapauksissa poista ensin sähkömagneettisen häiriön syy ja toista mittauksesi. Näiden äärimmäisten sähkömagneettisten häiriöiden aikana laitteesi suojelee itseään ja astuu suojaan. Astut taas normaaliin käyttötilaan poistamalla ja vaihtamalla tuotteen pariston häiriön poistamisen jälkeen.

YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

Hyvä asiakas,

Onneksi olkoon, kun ostit uuden GRUNDIG Digitaalisen vaakasi PS 4110.

Lue huolellisesti seuraavat huomautukset, jotta voit käyttää laadukasta GRUNDIG-tuotettasi usean vuoden ajan.

Vastuullinen lähestymistapa!



GRUNDIG keskittyy sopimuksiensa mukaisesti sosiaalisiin työolosuhteisiin oikeudenmukaisiin palkkoihin niin ulkoisten työntekijöiden kuin tavarantoimittajien osalta. Kiinnitämme myös suurta

huomiota raakamateriaalien tehokkaaseen käyttämiseen ja vähennämme jatkuvasti useiden tonnien edestä muovijätteen syntymistä vuosittain. Lisäksi laitteiden lisävarusteet ovat saatavilla vähintään 5 vuoden ajan.

Elämisen arvoisen tulevaisuuden puolesta. Hyvästä syystä. Grundig.

Säätimet ja osat

Katso kuva sivulla 3.

Pinnalla

- A** Bambuspuu pinta
- B** Nestekidenäyttö (LCD)

Ala osas sa

- C** Anturit liukuestotuella varustettuna
- D** Kytkin metrisen ja imperiaalisella mittauksen välillä vaihtamiseksi (kg/puntaa/st)
- E** Patterilokeron kansi.

Valmistelu

Liittäminen /pattereiden vaihtaminen

Laitte juoksee neljällä 1,5V patterilla (AAA/UM4/R03). Vaihda aina kaikki patterit samaan aikaan.

- 1 Avaa patterilokeron kansi [E] laitteen pohjassa painamalla ja työntämällä nuolta alaspäin ja poistamalla patterilokeron kansi.
- 2 Jos tarpeen, poista kuluneet patterit ensin ja hävitä ne ympäristöstävällisellä tavalla. Sijoita neljä uutta 1,5V patteria (AAA/UM4/R03) patterilokeroon. Huomioi oikea polaarisuus patterilokerossa osoitetulla tavalla.
- 3 Sulje patterilokeron kansi. Varmista, että se naksahtaa paikalleen.

Huomautuksia

- Älä altista pattereita liialliselle kuumuudelle, esimerkiksi suoran auringonvalon, keittimien tai tulen aiheuttamana.
- Jos patteri alkaa kulua loppuun, ilmestyy LCS-näytölle »Lo« varoitus [B]. Liitä heti neljä uutta patteria.
- Poista patterit, jos ne ovat kuluneet tai jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan. Valmistaja ei ota vastuuta vuotavista pattereista johtuvista vahingoista.

Ympäristöhuomautus

- Pattereita, mukaanlukien niitä, jotka eivät sisällä raskasmetallia, ei tulisi hävittää kotitalousjätteiden kanssa. Hävitä vanhat patterit paikallisten lakisäätelyn mukaisesti.

Painoyskikön määrittäminen

Tämä laite pystyy näyttämään painon imperiaalisessa (lb: puntaa, st: kivi) ja metrinen (kg: kilogramma) yksiköissä.

- 1 Aseta haluamasi painoyskikko jatkuvasti painamalla painiketta metrisen ja imperiaaisen yksikön välillä vaihtamiseksi [D].

Käyttö

- 1 Aseta vaakaturvallisuus, vakaalle pinnalle.
- 2 Astu varovasti vaa'an lasipinnalle [A] ja seiso liikkumatta painosi mittaamisen ajan.

Huomautuksia:

- Astu laitteelle varovasti vain vasemmalla tai oikealla jalalla, sijoittamalla se pinnan päälle. Varmista, että jalkasi pysyy ainakin 2 cm etäisyydellä reunasta. Sijoita sitten toinen jalkasi ja aseta se samalla tavalla pinnan toiselle puolelle.
- Sijoita kehosi paino laitteen keskelle.
- Vaakasi sisältää mukavan auto päällä toiminnon. Se kytkeytyy automaattisesti päälle, kun astut sen päälle ja mitattu kehon paino ilmestyy vain 2-3 sekunnin sisällä.
- 3 Painosi vilkkuu nestekidenäytöllä [B].
- Odota, kunnes näytetty painosi ei enää vilku.



- 4 Noin 10 sekunnin päästä vaakasi kytkeytyy automaattisesti pois.

Huomautuksia

- Laitteella on itsekalibroittoiminto. Jokaisen päällekytkennän jälkeen se suorittaa itsekalibroinnin, joka voi aiheuttaa epätarkan painon mittauksen ensimmäisellä 2 mittauksella.
- Jos patteri alkaa kulua loppuun, ilmestyy LCS-näytölle »LO« varoitus **B**. Vaihda patteri uusiin.



- Vaakan maksimilasti on 180 kg. Jos se ylittää, ilmestyy "Err" nestekidenäytölle **B**. Astu pois pinnalta heti.



- Jos nestekidenäyttö näyttää häiriötä, aseta vaaka uudelleen. Poista patterit, odota 10 sekuntia ja liitä ne uudelleen.
- Vaaka on varustettu automaattisella poiskytkentätoiminnolla pariston säästämiseksi. Se kytkeytyy pois automaattisesti 10 sekunnin jälkeen, kun mittaus on valmis.

Puhdistus ja huolto

Varoitus

- Varmista, että noudatat turvallisuusohjeita tarkasti puhdistuksen aikana.
- 1 Odota, kunnes laite kytkeytyy automaattisesti pois.
- 2 Käytä kosteaa kangasta laitteen ulkopuolen puhdistamiseksi.

Varotoimi

- Älä koskaan puhdistusaineita, alkoholia, bensiiniä, luotinaaineita tai hiovia puhdistusaineita, metalliesineitä, metallinkiillottimia tai kovia harjoja laitteen puhdistamiseen.
- Älä laita laitetta veteen tai muuhun nesteeseen..

Huomio

- Kuivaa kaikki osat varovasti pehmeällä pyyhkeellä laitteen puhdistamisen jälkeen.

Säilytys

Jollet aio käyttää laitetta pitkään aikaan, säilytä se huolella.

Varmista, että laite on täysin kuiva.

Varastoi laitetta viileässä ja kuivassa paikassa, joka on suojeltu kosteudelta ja suoralta aurin-
gonvalolta.

Muista säilyttää laite lasten ulottumattomissa.

Poista paristot paristolokerosta, kun et käytä laitetta pitkään aikaan.

Ympäristöhuomautus

Tuote on valmistettu korkealaatuisista osista ja materiaaleista, jotka voidaan käyttää uudelleen ja jotka soveltuvat kierrätykseen.



Älä siksi hävitä tuotetta ja paristoja normaalin kotitalousjätteen mukana sen käyttöiän päätyttyä. Toimita se sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyspisteeseen. Tämä on ilmaistu tuotteessa, käyttöoppaassa ja pakkauksessa tällä symbolilla.

Kysy paikallisviranomaisilta lähimmän keräyspisteen sijaintia.

Auta suojelemaan ympäristöä kierrättämällä käytetyt tuotteet.

Tekniset tiedot



Tämä tuote mukautuu Euroopan direktiiveihin 2004/108/EY ja 2006/95/EY.

Virtalähde

4 x 1.5 V paristot (AAA/UM4/R03)

Maksimi painolasti

180 kg / 396 pn / 28 st

Minimi painolasti

6,0 kg / 13 pn / 1 st

Asteikko

d = 100 g

Ympäristölämpötila

20°C ± 15 °C

Oikeus teknisiin ja muotoilumuutoksiin pidetään.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 908 1500 12/51

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG